


La cirugía más sencilla con tan solo dos pasos.

Uso para TSIII / IV SSIII USIII / IV


122 Taper KIT

- Un kit quirúrgico optimizado para los implantes cónicos.
- Reduce del tiempo de cirugía con un procedimiento rápido y preciso.
- Mayor comodidad para el usuario, no necesita perforar la cortical.


Hueso blando
D.4

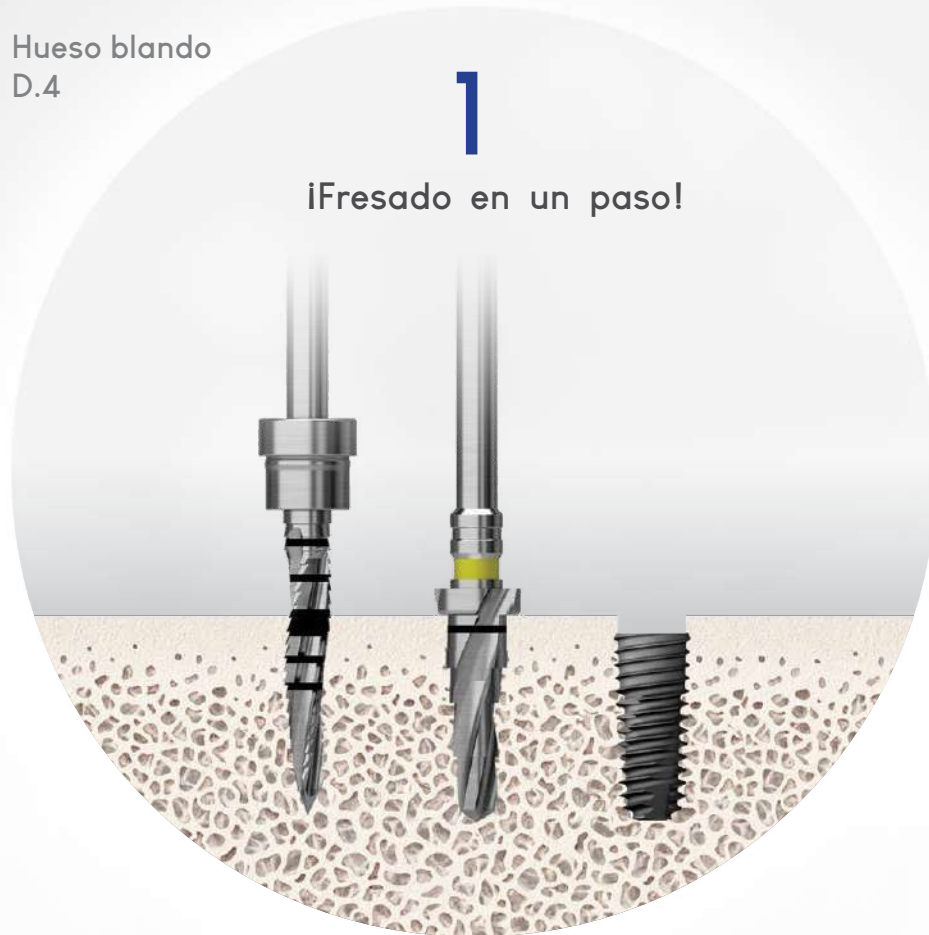

Hueso normal
D.2 y D.3

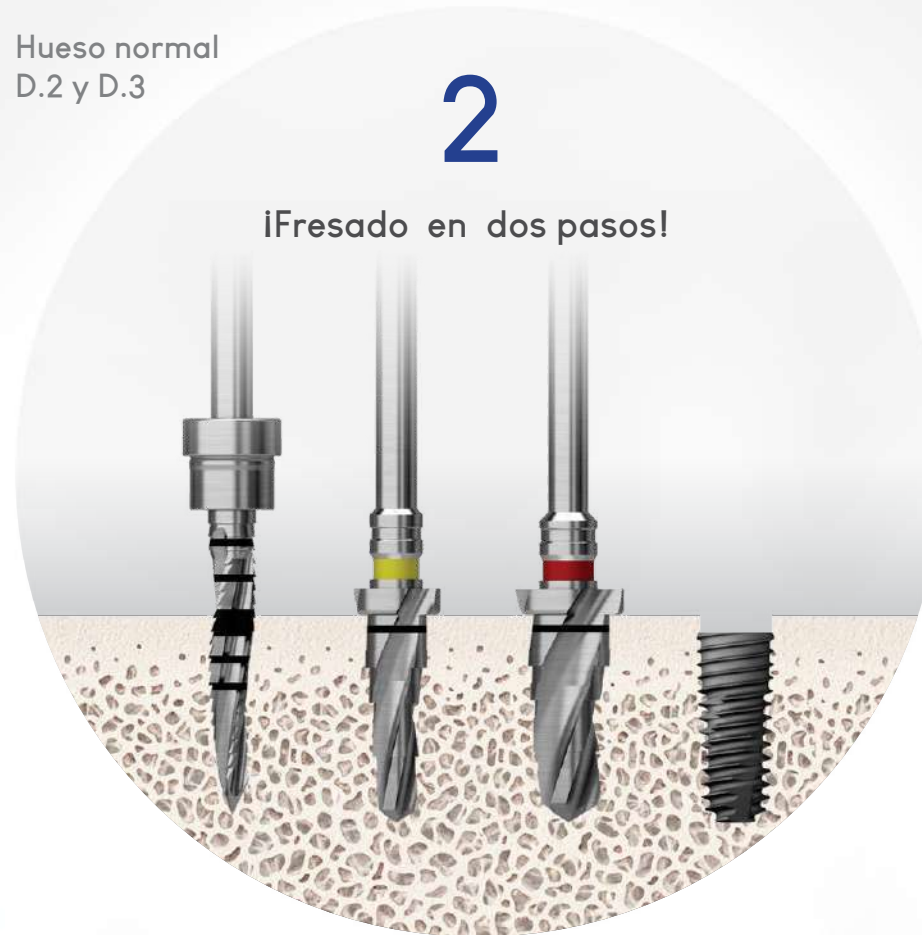

Hueso duro
D.1

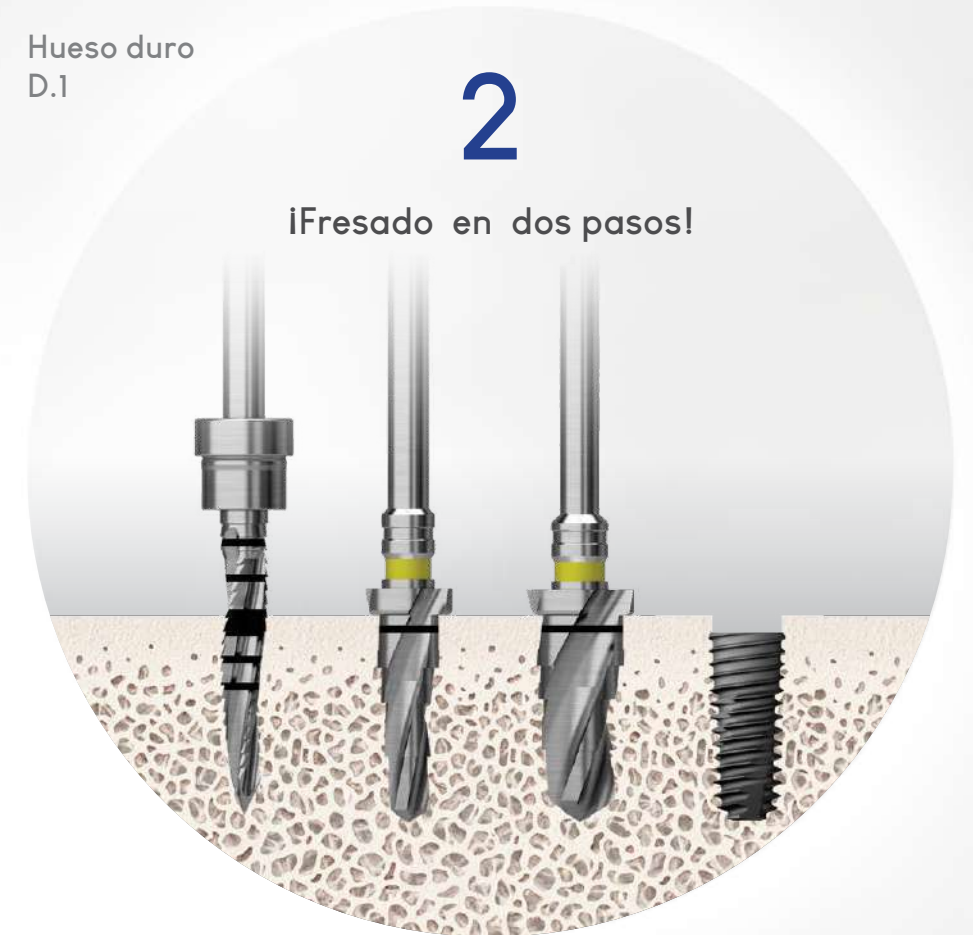


Excelente poder de fresado.

Maximiza la potencia de fresado, su capacidad de corte, omite el paso intermedio y proporciona un resultado de perforación suave, preciso y rápido.
Fresas con alta durabilidad.



Prevención del calentamiento del hueso.


La excelente capacidad de fresado, evita la perforación intermedia, reduciendo el calentamiento del hueso, al mantener una temperatura de perforación más baja.

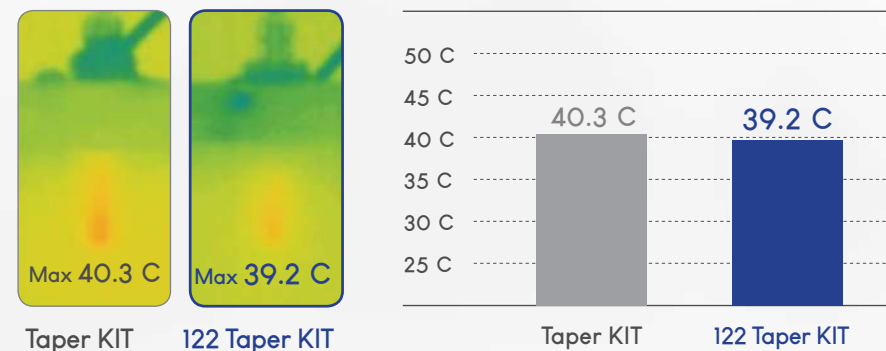

Temperatura de fresado

Prevención del rebote de la fresa.

La fresa cónica, escalonada, también funciona como fresa piloto de la siguiente, evitando que rebote durante el fresado. Además, su tope evita una perforación excesiva.

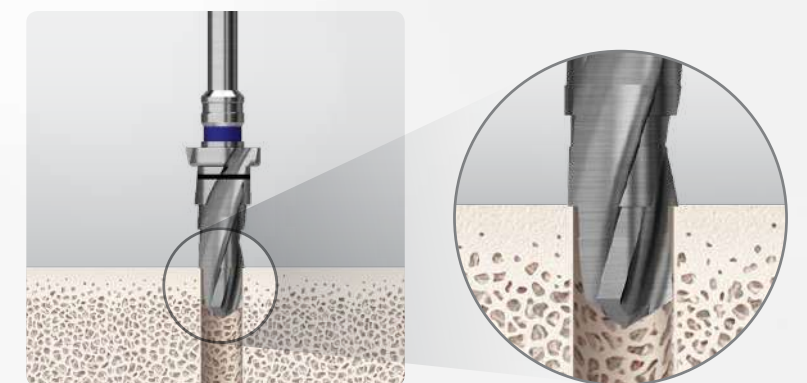

122 Taper KIT (O122TPK)

Disponible para los siguientes sistemas de implantes:

- TSIII / IV
- SSIII
- USIII / IV

Componentes

Torque Wrench
TW30B



Depth Gauge
OSDG

