

K3™

Sencilla, pero sofisticada





El sillón de tratamiento de Osstem Implants

Sencillo pero sofisticado

Presentamos nuestro sillón dental más más avanzado. Con diseño ergonómico que permite la interacción entre el odontólogo, su equipo auxiliar y sus pacientes. Diseñado por reconocidos dentistas e ingenieros biomédicos,. El equipo dental K3 proporciona una experiencia cómoda y acogedora para el paciente y un espacio de trabajo eficiente para el profesional.

La flexible integración del equipo, permite un fácil acceso que mejora el tiempo de tratamiento y la atención al paciente.



Construido para durar

Solo se utilizan materiales de la más alta calidad, Todos los sillones de la unidad K3 están garantizados para durar en el tiempo. Los sillones se someten a 10.000 rondas de ajustes en altura y 5 años de pruebas de encendido y apagado sin que se produzca el más mínimo fallo. El sillón de K3 está optimizado a la perfección.

Inversión Inteligente

Calidad y durabilidad excepcional. Cada sillón K3 cumple con todas las expectativas a un precio sin precedentes.

Integración Flexible

Ha sido construido manteniendo siempre la importancia de la aerodinámica. El sillón de la unidad K3 satisface todas sus necesidades al alcance su mano.



Integración Flexible

Siempre a su alcance cuando lo necesite

La pantalla de mandos SMART del sillón K3, incorpora todas las herramientas y la información necesaria para realizar tratamientos cómodos con la máxima eficiencia. Incorpora una pantalla LCD amplia e intuitiva en color, de 4,3" sobre una sobremesa espaciosa para proporcionar toda la información que el odontólogo necesita en un ligero vistazo.



※ Handpieces are not included and can be purchased separately.



Permite la mejor posición durante el tratamiento

El sillón de la unidad K3 brinda la posición mas optimizada para los odontólogos, personal auxiliar y pacientes durante todo el tratamiento. Con control de altura ajustable desde 14" (365 mm) hasta 31" (795 mm) y permite un suave movimiento de la mesa para manejar perfectamente el espacio.





Funciones de la pantalla de mandos del Dr. Table

La pantalla de mandos de la unidad K3 del Dr. Table viene equipada con un panel de visualización LCD a color de 4,3" que proporciona toda la información necesaria de un vistazo.


Las diversas funciones adicionales, como el visor de películas, la selección de la posición del paciente para su tratamiento, el pre-ajuste del RPM y el control de potencia del escalador, permiten que el odontólogo pueda operar de manera más estable y metódica.

Amplio espacio de trabajo

La mesa de trabajo del equipo K3 es muy amplia y permite realizar procedimientos mejorados: soporte de información para un fácil acceso a gráficos y a tablets, bandeja de instrumentos con todas las herramientas necesarias y además viene con una alfombrilla de ratón.

Bandeja y sistema de brazos SMART

La bandeja y el sistema de brazos, están diseñados con un ángulo óptimo para retirar e insertar los instrumentos sin ninguna complicación. Las luces LED indican cuando los instrumentos están en la posición de descanso, lo que reduce el riesgo de que se caigan del soporte.

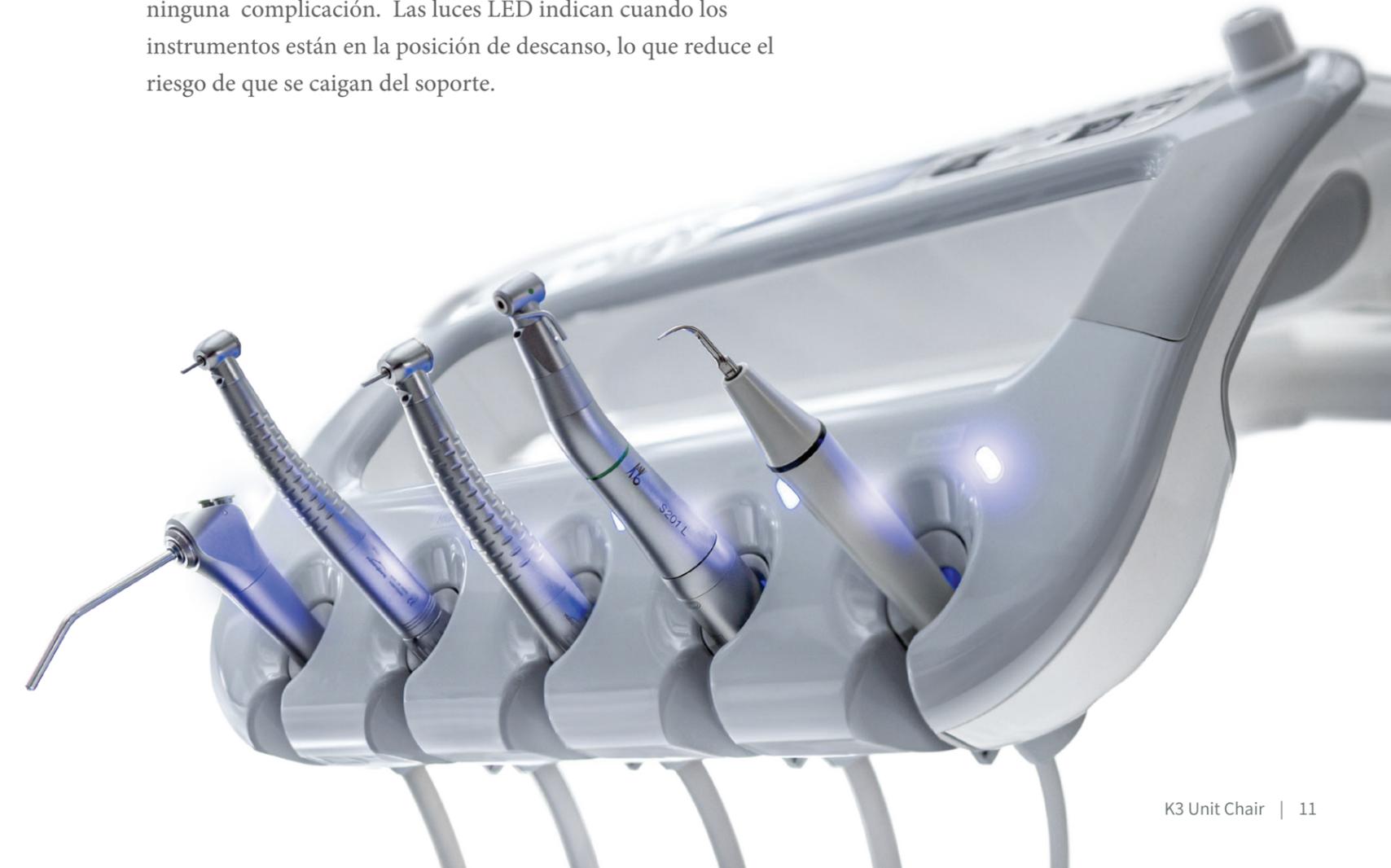

Simplificando el tratamiento

Sencillo y adaptable a sus necesidades

Diseñado para brindar una asistencia perfecta

Varias funciones, entre ellas la posición de tratamiento, enjuague en escupidera y los botones de control de luz, están montados en la pantalla de mandos, operaciones de la sobremesa para maximizar su rendimiento.



Escupidera de cristal Sistema de suministro de agua con sensor dual

- 1 La amplia escupidera transparente permite llevar a cabo una limpieza y un mantenimiento fácil. El sistema de suministro de agua con sensor dual permite controlar la cantidad de agua liberada. Están diseñados para adaptarse a la altura y la forma de los pacientes de todas las edades, promoviendo la comodidad del paciente, proporcionando la comodidad más conveniente para el paciente.

2 Suministro de agua ajustable. Interruptor de agua caliente

El mando del suministro de agua, el del desagüe y el interruptor de encendido/apagado del agua caliente están ubicados en la parte frontal de la unidad para facilitar el acceso al personal auxiliar

3 Filtro de succión mejorado & rejilla lateral

El filtro de aspiración fácilmente lavable permite una limpieza y mantenimiento sencillo. La rejilla lateral desmontable puede mantener varios instrumentos durante el tratamiento.





Disfrute de la la máxima comodidad

Sillón con diseño ergonómico

El ordenador central distribuye uniformemente el peso del paciente, especialmente las zonas que entran en contacto directo con el sillón como los hombros, la espalda y las caderas proporcionando comodidad máxima

Diseñado para ofrecer la máxima comodidad y mejorar el cuidado para el paciente



The K3 patient chair utilizes a high-performance hydraulic motor, which is affixed to the floor to minimize noise and trembling during height adjustments. The oversized backrest, seat and headrest are all ergonomically designed to enhance patient comfort and experience. With the adjustable height, the dentist can easily perform treatment in different positions.

Posicionamiento seguro (Sistema hidráulico)

El sillón de la unidad K3 utiliza un motor hidráulico de alto rendimiento, fijado al suelo para minimizar el ruido y el movimiento durante los ajustes de altura. Su amplio respaldo, su asiento y su reposacabezas están diseñados ergonómicamente para mejorar la comodidad y la experiencia del paciente. Con la altura ajustable, el dentista puede realizar fácilmente sus tratamientos en distintas posiciones.

Diseñado ergonómicamente (Reposacabezas y respaldo)

El reposa cabezas ajustable con una sola mano, brinda el apoyo necesario a cabeza y cuello en todos los ángulos. Su amplio respaldo proporciona un amplio apoyo para todo tipo de cuerpos, lo que permite a los pacientes descansar cómodamente, incluso durante procedimientos prolongados.

Compacto e Intuitivo (Reposabrazos)

El exclusivo reposa brazos circular del sillón de K3 es robusto y cómodo. Los pacientes se sienten seguros sujetándolo y lo encuentran cómodo tanto cuando están sentados como tumbados. El reposa brazos se mueve hacia arriba y hacia abajo con rapidez y facilidad, lo que permite a los pacientes sentarse y levantarse con facilidad del sillón.



Visibilidad excepcional

Lampara LED avanzada

La lámpara LED es aproximadamente un 50% más grande que otras lámparas. Además, facilita las revisiones de dientes y tejidos blandos.

Filtro de corte de luz azul

Al adoptar la función Blue Light Cut-Off, se pueden controlar problemas comunes en la consulta como el endurecimiento de la resina por efecto del calor garantizando al mismo tiempo, un excelente nivel de iluminación.



Sensor sin contacto

Touchless sensor allows for hands-free activation and composite-safe mode activation, minimizing the risk of cross-contamination of the light head surface.

Mango de luz autoclavable

Las asas de la lámpara son fácilmente desmontables y autoclavables.





Marrón



Azul Oscuro



Morado

Colores

Hemos seleccionado los colores adecuados para usted y para el interior de su clínica



Azul



Rojo



Dorado



Marfil

Sencillo y adaptable a sus necesidades

Pantalla de tratamiento (Monitor)

La visualización del tratamiento puede mejorar la comunicación visual entre el odontólogo y el paciente, sirviendo como herramienta de planificación del tratamiento y educación para el paciente. También puede ayudar a desviar la atención del paciente durante el tratamiento, reduciendo así su estrés.



Mando de pie

Pedal con joystick, permite al odontólogo controlar todos los movimientos del sillón y de la unidad dental sin mover un dedo.





Doctor Stool

Estable, seguro y cómodo. El taburete del profesional está diseñado para proporcionar un amplio apoyo y reducir la fatiga.



Dimensiones de K3

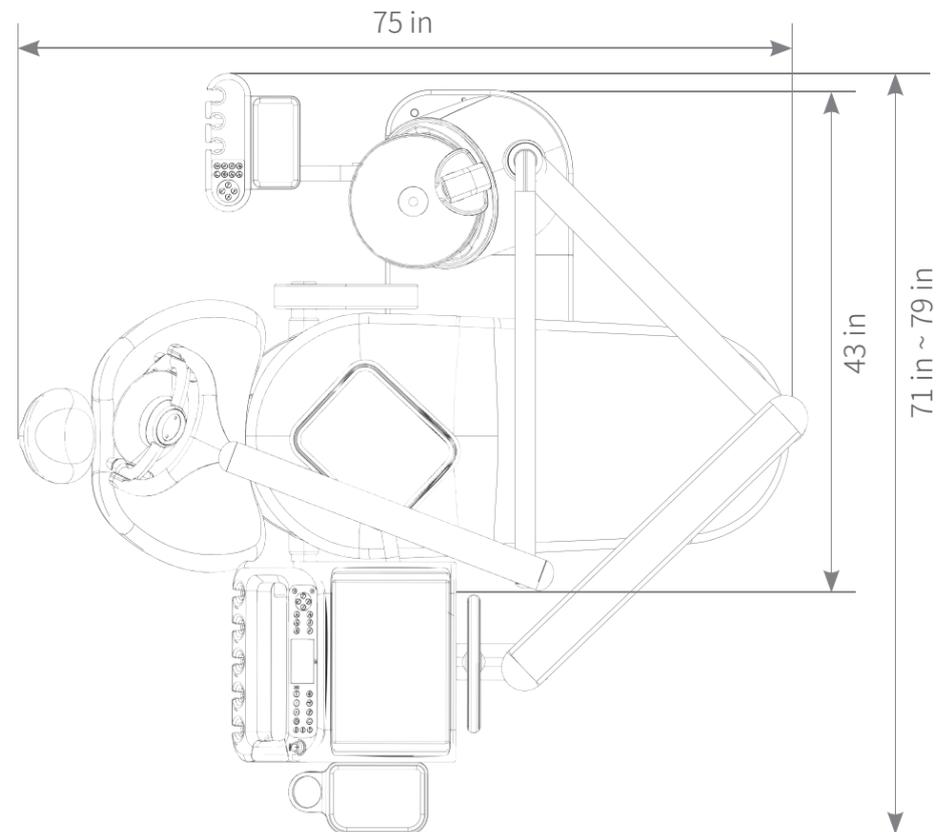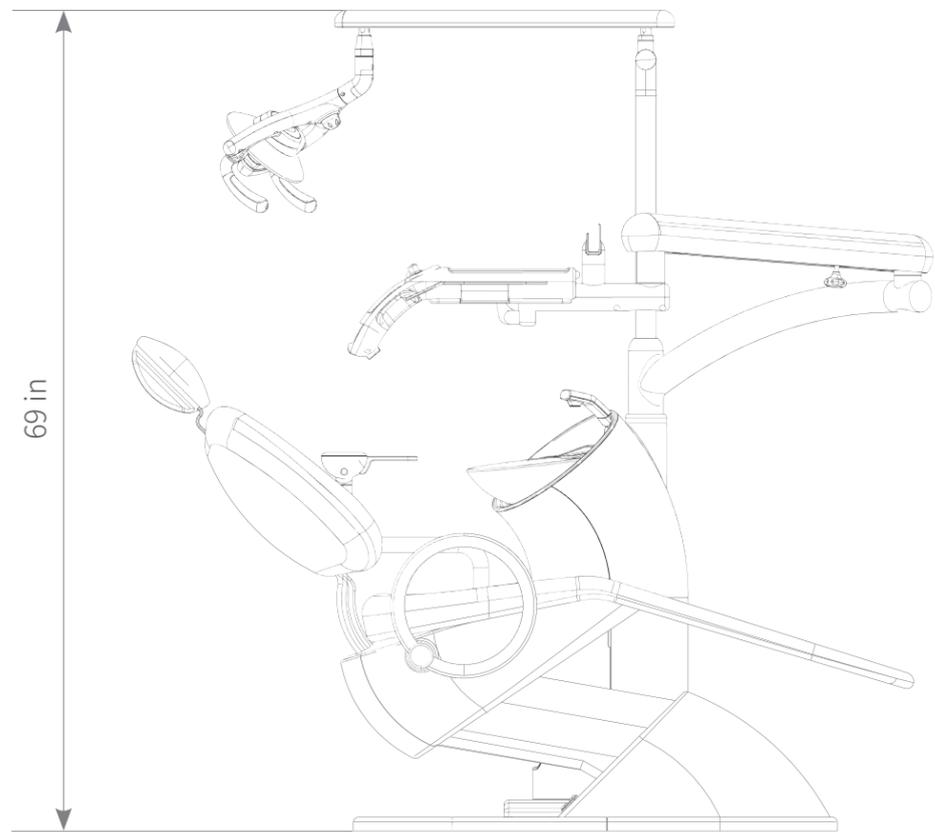



HIOSSEN
IMPLANT

Aqui la frase Europea y cambiar logo



Por favor póngase en contacto con el delgado de su zona para representarle K3

Osstem España Avda. de Manoteras 32 Edificio B 1B 28050 Madrid

@hiossen_implants @HiossenImplants @Hiossen

Copyright © 2021 Hiossen Inc. All rights reserved.

All information included herein is subject to change without notice. No part of this brochure may be reproduced in any manner without the prior written permission of Hiossen Inc. Hiossen and the Hiossen logo are trademarks of Hiossen Inc. All other brand or product names are trademarks of their respective companies or organizations.

※ 5 Year Limited Warranty, please refer to the full warranty statement.

OSSTEM[®] **IMPLANT**

PB21K3UBSR1.0

Ed.: Oct 2023